



# 验证报告

## VERIFICATION REPORT

验证企业：御本堂控股集团有限公司

验证地址：北京市怀柔区恒利街65号

验证对象：御本堂温湿度监测系统验证

验证项目：

温度数据的采集、传送、存储以及报警功能  
监测设备的测量范围和准确度  
测点终端安装数量及位置  
系统与温度调控设施无联动状态  
系统在断电、计算机关机状态下可保证实时数据监测、记录、报警、传送功能正常  
应可防止用户修改、删除、反向导入数据

验证日期：

### 验证标准和技术要求：

依照《药品经营质量管理规范》（GSP）及附录五《验证管理》、《GBT34399-2017医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范的要求》。

### 适用范围：

医药产品储存运输过程中涉及的温控仓库、温控车辆、冷藏箱、保温箱、冰柜及温度监测系统的性能确认等活动。  
保藏机构的仪器设备应保证资源的质量和安全性，根据需要定期维护和更换。关键仪器设备应定期进行验证、检定或校准。保藏机构的存储设备应有明确的监控措施或监控设备。

签发日期：

# 目录

1 参与人员及培训记录.....	3
1.1 验证报告的起草、审核与批准.....	3
1.2 验证参与人员.....	3
1.3 培训记录.....	3
2 验证目的.....	4
3 验证依据.....	4
4 本次验证所用监测系统及监测设备.....	4
4.1 监测系统描述.....	4
4.2 监测设备描述.....	4
4.2.1 监测设备清单.....	4
5 确认内容.....	5
5.1 安装确认.....	5
5.2 运行确认.....	5
5.3 采集、传送、记录数据以及报警功能的确认.....	5
5.3.1 确认结果.....	5
5.3.2 确认图片.....	6
5.4 监测设备的测量范围和准确度确认.....	7
5.4.1 确认结果.....	7
5.4.2 确认图片.....	8
5.5 测点终端安装数量及位置确认.....	9
5.5.1 确认结果.....	9
5.5.2 确认图片.....	10
5.6 监测系统与温度调控设施无联动状态的独立安全性运行性能确认.....	10
5.6.1 确认结果.....	10
5.6.2 确认图片.....	10
5.7 系统在断电、计算机关机状态下应急性能确认.....	11

5.7.1 确认结果.....	11
5.7.2 确认图片.....	11
5.8 应可防止用户修改、删除、反向导入数据.....	11
5.8.1 确认结果.....	11
5.8.2 确认图片.....	11
6 系统存在的风险及预防措施.....	12
7 偏差处理.....	12
8 再次确认周期.....	12
9 报告确认.....	12

## 1 参与人员及培训记录


### 1.1 验证报告的起草、审核与批准

职责	姓名	职务	企业	签名	日期
文件起草	王飞	公司专员	北京世福宝科技有限公司		
项目负责人	李代万	公司经理	北京世福宝科技有限公司		
文件审核	王小敏	设备工程部	御本堂控股集团有限公司		
文件审核	袁艳妮	质量管理部	御本堂控股集团有限公司		
文件批准	王亚辉	质量管理部	御本堂控股集团有限公司		

### 1.2 验证参与人员

职责	姓名	企业	职务
起草	王飞	北京世福宝科技有限公司	公司专员
审核	李代万	北京世福宝科技有限公司	公司经理
审核	王小敏	御本堂控股集团有限公司	设备工程部部长
批准	朱婧	御本堂控股集团有限公司	质量负责人

### 1.3 培训记录

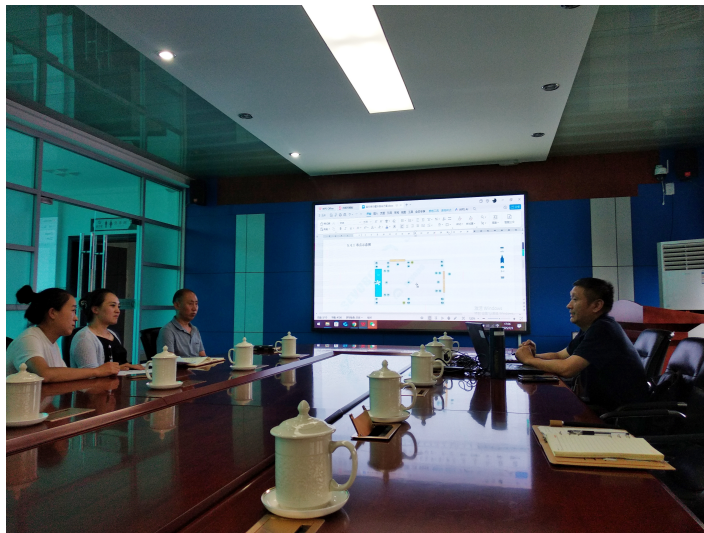

培训记录

## 2 验证目的

确认温湿度调控设备及监测系统能够符合规定的设计标准和要求，并能安全、有效地正常运

行和使用，确保药品在储存过程中的质量安全。

### 3 验证依据

- 1、2016新修订《药品经营质量管理规范》及附录三《温湿度自动监测》、附录五《验证管理》。
- 2、《医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范 GB/T 34399-2017》。

## 4 本次验证所用监测系统及监测设备

### 4.1 监测系统描述

本监测系统融合了智能传感器、云计算、移动互联网等多项先进信息技术。本系统由服务器云平台、信息化智能保温箱（温度实时采集）、移动智能终端等组成。

该系统集温度自动实时的采集、监测、现场显示、记录、超标声光预警、远程传输以及监管信息实时传递、数据查询、历史记录、APP预警等功能于一体，可实现24小时连续采集监测保温箱的温度信息。

### 4.2 监测设备描述

- 1、监测所使用的温度传感器应当经法定计量机构校准。
- 2、监测所使用的温度传感器应当适用被验证设备的测量范围，测量范围在0℃~75℃之间，温度的最大允许误差为±0.5℃；测量范围在-30℃~0℃之间，温度的最大允许误差为±1.0℃。
- 3、设备的校准证书复印件应当作为必要附件。

#### 4.2.1 监测设备清单

型号	设备号	类型	车库箱号
SVB-400B	01	温湿度	综合库wk1002
SVB-400B	02	温湿度	综合库wk1002
SVB-400B	03	温湿度	阴凉库wk1005
SVB-400B	04	温湿度	阴凉库wk1005
SVB-400B	05	温湿度	阴凉库wk1004
SVB-400B	06	温湿度	阴凉库wk1004
SVB-400B	07	温湿度	胶囊壳库wk1010
SVB-400B	08	温湿度	胶囊壳库wk1010
SVB-400B	09	温湿度	常温库wk1006
SVB-400B	10	温湿度	常温库wk1006

SVB-400B	11	温湿度	预留7
SVB-400B	12	温湿度	预留7
SVB-400B	13	温湿度	标签说明书库wk1007
SVB-400B	14	温湿度	标签说明书库wk1007
SVB-400B	15	温湿度	阴凉库wk1011
SVB-400B	16	温湿度	阴凉库wk1011
SVB-400B	17	温湿度	不合格品库wk1003
SVB-400B	18	温湿度	不合格品库wk1003
SVB-400B	19	温湿度	成品库wk1009
SVB-400B	20	温湿度	成品库wk1009
SVB-400B	21	温湿度	冷库wk1008
SVB-400B	22	温湿度	冷库wk1008

## 5 确认内容

### 5.1 安装确认

序号	检查项目	要求	结果
1	监测设备合格证	有，与设备相符	合格
2	监测设备说明书	有，与设备相符	合格

### 5.2 运行确认

序号	检查项目	要求	结果
1	监测终端	运行正常，显示正常	合格
2	温度监测系统	运行正常，显示正常	合格

### 5.3 采集、传送、记录数据以及报警功能的确认


#### 5.3.1 确认结果

序号	性能描述	测试方法	结果
----	------	------	----


1	系统应至少每隔1min更新一次测点温度数据；数据传送及时、完整；记录内容包括温度值、日期、时间、测点位置、库区或运输工具类别等；在药品储存过程中至少每隔30min自动记录一次实时温度数据，在运输过程中至少每隔5min自动记录一次实时温度数据	至少导出三个不同时间段的温度数据进行核查确认	合格
2	当监测的温度值超出规定范围时，系统应当至少每隔2min记录一次实时温湿度数据；当监测的温度值达到设定的临界值或者超出规定范围，系统应当能够实现就地和在指定地点进行声光报警，同时采用短信通讯的方式，向至少3名指定人员发出报警信息	利用人体或其它热源改变测点终端的温度触发报警确认报警功能是否符合要求	合格
3	测点终端采集的数据通过网络自动传送到管理主机，进行处理和记录，并采用可靠的方式进行数据保持，确保不丢失和不被改动	数据在测点终端，服务器或管理主机监测进行显示	合格
4	在另一台立的计算机或存储设备按日备份数据	检查备份数据文件夹，并拍照留存	合格
5	报警功能	在测试温度超标报警，测试是否指定的3个人收到短信通知报警	合格

### 5.3.2 确认图片




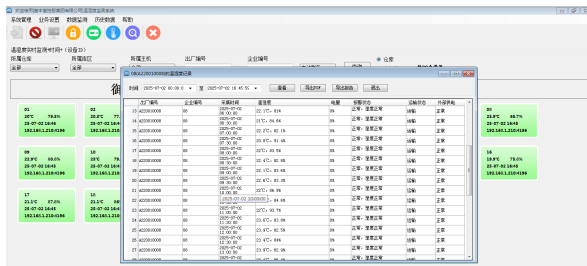


正常状态数据30min记录一次

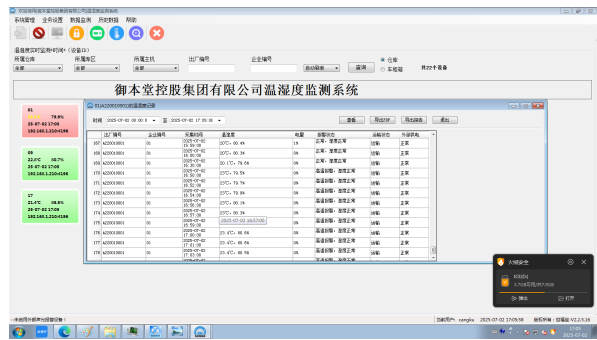


报警状态数据2min记录一次

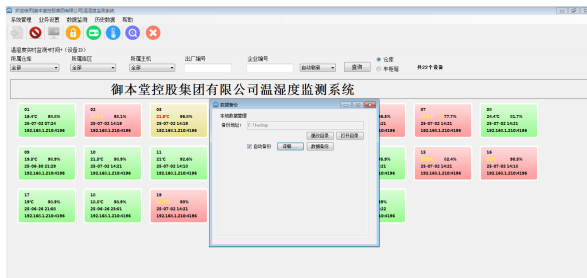

数据备份设置

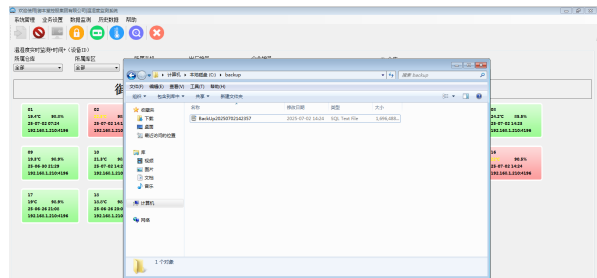

数据备份文件目录

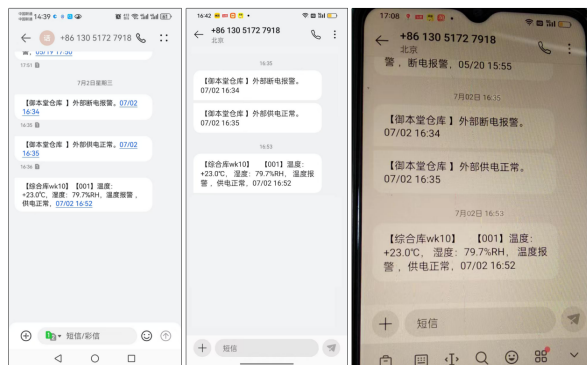

短信报警

## 5.4 监测设备的测量范围和准确度确认

### 5.4.1 确认结果

序号	性能描述	测试方法	结果
1	测量范围在0℃~75℃之间，温度的最大允许误差为±0.5℃；测量范围在-30℃~0℃之间，温度的最大允许误差为±1.0℃	核查生产厂家提供的测点终端合格证明资料或定期校验资料以确认其准确度	合格

### 5.4.2 确认图片






## 5.5 测点终端安装数量及位置确认

### 5.5.1 确认结果

序号	性能描述	测试方法	结果
1	a) 每一独立的药品库房或仓间至少安装2个测点终端，并均匀分布。b) 平面仓库面积在100平方米以下的，至少安装2个测点终端；100平方米以上的，每增加100平方米至少增加1个测点终端，不足100平方米的按100平方米计算。c) 高架仓库或全自动立体仓库的货架层高在4.5米~8米之间的，每100平方米面积至少安装4个测点终端，每增加100平方米至少增加2个测点终端，并均匀分布在货架上、下位置；货架层高在8米以上的，每100平方米面积至少安装6个测点终端，每增加100平方米至少增加3个测点终端，并均匀分布在货架的上、中、下位置；不足100平方米的按100平方米计算。d) 高架仓库或全自动立体仓库上层测点终端安装的位置，不应低于最上层货架存放药品的最高位置。	检查所有仓库的布点数量是否符合要求	合格

3	g) 每台冷藏箱或保温箱应当至少配置一个测点终端。	检查所有保温箱的布点数量是否符合要求	合格
4	测点终端应当牢固安装在经过确认的合理位置，避免储运作业及人员活动对监测设备造成影响或损坏，其安装位置不应随意变动	检查测点安装位置是否合理、牢固。	合格

### 5.5.2 确认图片

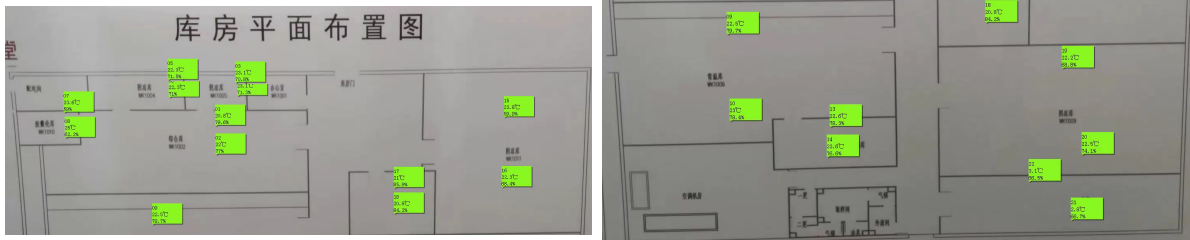

## 5.6 监测系统与温度调控设施无联动状态的独立安全性运行性能确认

### 5.6.1 确认结果

序号	性能描述	测试方法	结果
1	控制系统与监测系统分别使用独立的传感器、控制主机、报警器和运行软件	现场观察	合格

### 5.6.2 确认图片



监测系统

温控系统

## 5.7 系统在断电、计算机关机状态下应急性能确认

### 5.7.1 确认结果

序号	性能描述	测试方法	结果
1	系统在断电、计算机关机状态下可不间断地采集、记录温度数据并可实现声光报警和短信报警功能	人为制造系统故障以判断故障报警功能是否正常	合格
2	当发生供电中断的情况时，系统应当采用短信通讯的方式，向至少3名指定人员发出报警信息	人为制造系统故障，检查是否能收到报警短信	合格

### 5.7.2 确认图片




短信报警

## 5.8 应可防止用户修改、删除、反向导入数据

### 5.8.1 确认结果

序号	性能描述	测试方法	结果
1	系统操作员与管理 员应凭不同密码登 陆系统	监测系统能提供不同账户密码进入系统	合格
2	无法修改、删除及 反向导入数据	分别以管理员身份，数据查询身份和参数设置身份登录，在各个操作界面测试是否具有数据修改，删除和反向导入操作功能	合格

### 5.8.2 确认图片

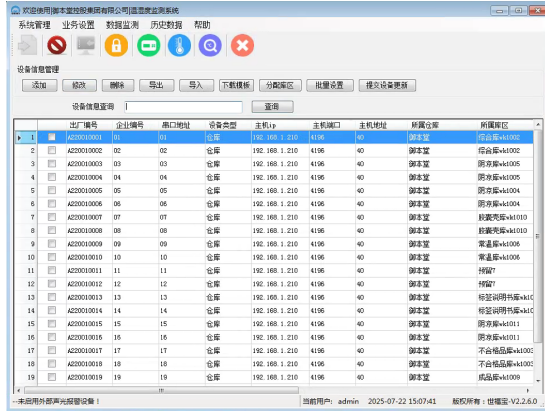

管理员账号登录



操作员账号登录

## 6 系统存在的风险及预防措施

序号	风险	防范措施
1	信息化保温箱在密闭仓库可能信号不好，采集数据无法上传到服务器中。	在信号不好的环境，增加基站或者基站信号放大器，保证LTE网络信号良好，数据及时上传，如果不能，更换保温箱位置，确保信号状态良好。

## 7 偏差处理

偏差描述	
偏差原因分析	
偏差处理	
处理结果	
处理人	
处理时间	
复核人	
复核时间	

## 8 再次确认周期

建议再次确认周期为1年。

## 9 报告确认

经验证小组审批，各项验证结果符合标准要求，批准投入使用，特此声明。

负责人